

WWW.RHINO-PERFORMANCE.COM

RHINO
PERFORMANCE

RHINO PRO 3

MANUAL DE USUARIO

WWW.RHINO-PERFORMANCE.COM



MANUAL DE USUARIO



1. DEFINICIÓN DE SÍMBOLOS	4
2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS	5
3. INDICACIONES DE USO	5
4. SISTEMAS Y COMPONENTES	5
5. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	6 - 7
6. MANTENIMIENTO Y CUIDADO	7 - 8
7. EMPAQUE, ENVÍO Y ALMACENAMIENTO	9
8. GARANTÍA	10

1. DEFINICIONES DE SÍMBOLOS



SÍMBOLO	EXPLICACIÓN	UBICACIÓN
	Consulte la documentación antes de usar y dar servicio	En la parte posterior del dispositivo y en el manual de instrucciones
	Compresor de protección Clase III	En la parte posterior del dispositivo
	Separe correctamente los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Deseche el dispositivo/accesorio/embalaje de acuerdo con la obligación legal en su área	En la parte posterior del dispositivo
	Precaución	En el manual de instrucciones
	Lavar a mano Temperatura máxima 40 °C	Sobre el código de etiquetado de cuidados de la prenda
	No use blanqueador	Sobre el código de etiquetado de cuidados de la prenda
	No planchar	Sobre el código de etiquetado de cuidados de la prenda
	Secado por goteo a la sombra	Sobre el código de etiquetado de cuidados de la prenda
	No lavar en seco	Sobre el código de etiquetado de cuidados de la prenda
	No secar en secadora	Sobre el código de etiquetado de cuidados de la prenda

2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS



PRECAUCIONES:


- Los niños no deben jugar con el compresor.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El dispositivo debe utilizarse únicamente con el compresor proporcionado.

3. INDICACIONES DE USO

El dispositivo está diseñado para masajes y relajación después del ejercicio. No está destinado a fines médicos.

4. SISTEMAS Y COMPONENTES

COMPRESOR PRO 3

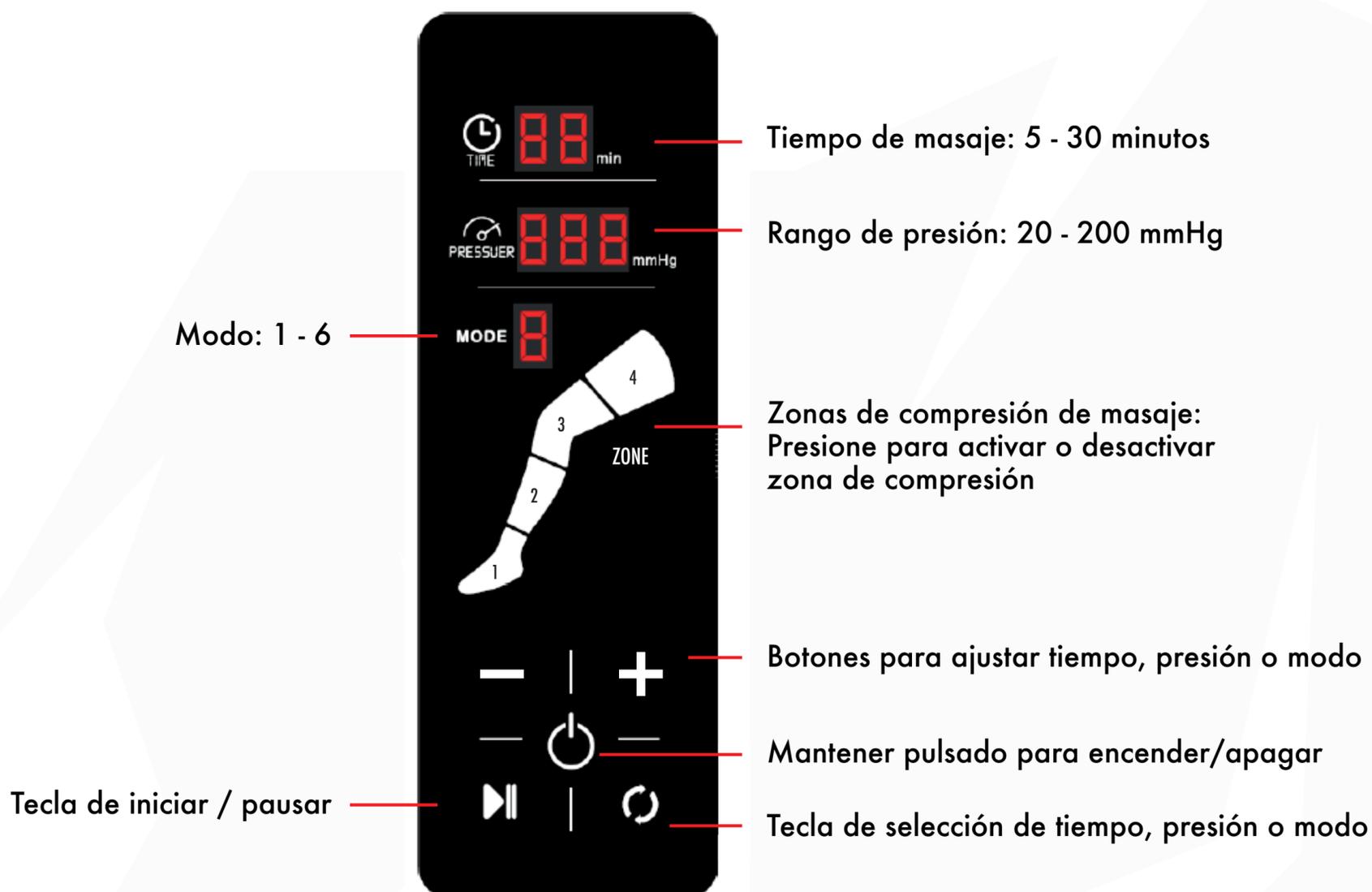

5. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Máquina de masaje mecánica

El producto se entrega en dos cajas de cartón. Dentro de la segunda caja encontrarás una mochila de transporte, en la cual vienen organizados el compresor, las botas de presoterapia y el cable de alimentación.

Botas de presoterapia

Retira las botas del paquete evitando el uso de objetos punzantes que puedan perforar o rasgar la prenda.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Conecte el compresor a un tomacorriente cercano al área donde se recibirá el masaje. El compresor emitirá un sonido.
2. Conecte la manguera al compresor, póngase las botas y cierre el zipper o el brazo/s y ajuste la faja.
3. Encienda el compresor manteniendo 2 segundos el botón de encendido.
4. Presione la tecla de selección para seleccionar los parámetros a ajustar, como la presión, el tiempo y el modo.
5. Use las teclas - y + para aumentar o disminuir los parámetros seleccionados.
6. Inicie el masaje presionando la tecla de iniciar.

MODOS DE USO - BOTAS Y BRAZOS

Mode 1	
Mode 2	
Mode 3	
Mode 4	
Mode 5	
Mode 6	Mode 1+Mode 2+Mode 3+Mode 4+Mode 5+Mode 6

5. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



Todos los modos inflan de forma ascendente (tobillo > muslo / muñeca > hombro), pero con distinta secuencia. Cada uno de los 6 modos está pensado para un momento distinto de tu rutina.

Modo 1 – Recuperación profunda

Infla una cámara a la vez (1 > 4), mantiene todas infladas y libera.
Ideal post-entreno: relaja, drena y reduce fatiga.

Modo 2 – Estimulación suave

Infla 1 cámara, se desinfla, sigue la siguiente.
Para retención de líquidos o sesiones ligeras.

Modo 3 – Activación moderada

Infla 2 cámaras a la vez, luego libera.
Buen balance entre intensidad y comodidad.

Modo 4 – Entrada en calor

Infla 3 cámaras a la vez, luego libera.
Perfecto para activar músculos antes de entrenar.

Modo 5 – Compresión total

Infla las 4 cámaras al mismo tiempo, luego libera.
Sensación intensa de alivio y descarga rápida.

Modo 6 – Secuencia combinada

Mezcla dinámicamente los 5 modos anteriores.
Ideal para una experiencia completa de estimulación y recuperación.

6. MANTENIMIENTO Y CUIDADO

CUÁNDO LIMPIAR

Cuando hay suciedad evidente, capa de cenizas y contaminación de fluidos corporales.
Cuando se utiliza para el siguiente paciente.
Cuando no se usa durante mucho tiempo, debe limpiarse, secarse y almacenarse.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie la carcasa exterior del compresor, las botas y las mangueras con un paño húmedo (no mojado) y una solución de agua con jabón suave.



¡ADVERTENCIA!

Solo un técnico autorizado puede abrir el compresor.

Antes de limpiar, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.

6. MANTENIMIENTO Y CUIDADO



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS BOTAS Y BRAZOS

1. Desconecte las botas o los brazos del compresor.
2. Desinfe y abra los zippers de las botas para exponer todos los lados. En el caso de los brazos desinflar únicamente.
3. Limpie las botas y los brazos con un paño húmedo con agua y jabón suave (no mojado) o con toallitas desinfectantes sin lejía.
4. Enjuague únicamente con un paño limpio ligeramente húmedo para retirar restos de jabón.
5. Seque las botas y los brazos al aire en un lugar ventilado.
6. La suciedad difícil de eliminar en la superficie puede requerir un lavado adicional a mano con una toalla limpia mientras las botas están húmedas. Evite estropajos o químicos abrasivos que puedan dañar la superficie exterior.



¡ADVERTENCIA!

NO permita que entren líquidos en el compresor, ya que esto puede presentar un peligro eléctrico.

Siempre permita que el compresor se seque antes de usar. No use lejía.



¡ADVERTENCIA!

NUNCA permita que entre agua en los conectores de las mangueras de las botas. Si el agua entra en su interior, puede dañar el compresor.



¡ADVERTENCIA!

NO coloque las botas ni los brazos en la lavadora.



¡ADVERTENCIA!

NO utilice las mangueras como "asas" para transportar, manipular o guardar las botas o los brazos.

7. EMPAQUE, ENVÍO Y ALMACENAMIENTO



La máquina de masaje mecánica se envía en un empaque de doble caja de cartón corrugado.

Dentro de la segunda caja se incluye una mochila de transporte, en la cual vienen organizados el compresor, las botas y/o brazo/s de presoterapia y el cable de alimentación.

Este diseño protege el equipo durante el manejo y transporte.

El dispositivo debe almacenarse en un área limpia y seca, entre 15 y 25 °C.

La exposición a corto plazo a temperaturas de -20 °C a +44 °C no dañará la unidad.

Para maximizar la vida útil del compresor, permita que se ajuste a la temperatura ambiente antes de usarlo si ha estado expuesto a temperaturas extremas.

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Para transporte y almacenamiento:

Temperatura ambiente: -20°C - +55°C

Humedad relativa: 10% -90% HR

Presión atmosférica: 80KPa a 106KPa

Para operación:

Temperatura ambiente: +5°C - +40°C

Humedad relativa: 15% - 85%

Presión atmosférica: 86KPa to 106KPa



Póliza de garantía

High Performance Recovery, S.A. de C.V garantiza este producto por tres meses a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo la siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a su vendedor autorizado o enviar un correo que se indique en esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones y accesorios.
2. High Performance Recovery, S.A. de C.V. Se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontraba con falla sin ningún cargo para el consumidor siempre que el daño sea un error de fabricación.
3. Deberá de presentar el producto con todas sus partes y el comprobante de compra, factura o nota.
4. El tiempo de reparación no excederá de 90 días naturales, contados a partir de la recepción de su correo o llamada solicitando ser efectiva su garantía.
5. La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
 - Si el producto ha sido usado en condiciones distintas a las normales.
 - Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.
 - Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres no autorizados.
6. Limitaciones de la Garantía:
 - Si no presenta la factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
 - Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
 - Si ha sido utilizado con fines comerciales, de presentación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente para uso personal.
 - Daños en equipo y partes de apariencia.
 - Rotura de piezas por mal manejo.
 - Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocados por cortocircuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
 - Daños por uso de partes que no sean genuinas.

Máquina de masaje mecánica

Marca: RHINO PERFORMANCE

Modelo: RHINO PRO 3

Especificaciones eléctricas: 12 Vcc; 2.5 A ó 30W

Adaptador: Entrada: 110 - 240 V; 50/60 Hz; 0.8 A. Salida: 12 V; 2.5 A ó 30 W

High performance Recovery, S.A de C.V.

RFC: HPR2101137WA

Guillermo González Camarena 1100, piso 3, Col. Santa Fe, Alcaldía. Álvaro Obregón, C.P. 01376, Ciudad de México, México

Telefono: +52 55 1839 3224

Correo: hola@rhino-performance.com

Hecho en China



¡GRACIAS POR TU COMPRA!

Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de promociones, motivación e información de valor para ti.

 @rhino.performance

 RHINO PERFORMANCE

WWW.RHINO-PERFORMANCE.COM

RHINO
PERFORMANCE

RHINO PRO 3

MANUAL DE USUARIO