



RECOVER FASTER, PERFORM BETTER.

[www.rhino-performance.com](http://www.rhino-performance.com)  
[hola@rhino-performance.com](mailto:hola@rhino-performance.com)  
WhatsApp: 55 1839 3224

## MANUAL DEL USUARIO

**RHINO**  
PERFORMANCE

MÁQUINA DE MASAJE MECÁNICA  
PISTOLA DE MASAJE

MODELO:

**RHINO  
GUN AIR**



Gracias por adquirir nuestro masajeador muscular de amplitud variable.

**Antes de usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones y consérvelas.**

En caso de cualquier discrepancia entre este manual y el producto, prevalece la información del producto.

## GRACIAS POR ELEGIR RHINO PERFORMANCE

ESTE EQUIPO FUE CREADO PARA AYUDARTE A SENTIRTE MEJOR DESPUÉS DEL EJERCICIO, DE UN ENTRENAMIENTO INTENSO O SIMPLEMENTE TRAS UN DÍA LARGO.

RELAJA TUS MÚSCULOS, REDUCE LA Tensión Y RECUPÉRATE COMO UN PROFESIONAL, DESDE TU CASA.












EN RHINO PERFORMANCE DISEÑAMOS PRODUCTOS PENSADOS PARA QUE CUIDES TU CUERPO Y RINDAS AL MÁXIMO.

LA RECUPERACIÓN TAMBIÉN ES PARTE DEL ENTRENAMIENTO.



## Precauciones

Lea el manual cuidadosamente antes de usar y ponga atención especial a los puntos de advertencia.

Símbolos			
	Corriente directa (DC)		Reciclable Li-ion
	No tirar en basurero común		No rodar
	¡Advertencia! Consulte documentos		Lea el manual cuidadosamente
	Frágil		Mantener en posición vertical
	Proteger de la lluvia		Reciclaje de papel
	Límite de apilamiento (5 cajas)		

## Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, asegúrese de estar al tanto de los siguientes contenidos. De lo contrario, podrían presentarse lesiones o riesgos de seguridad.

## Medidas de seguridad

### Sobre los usuarios y las partes del cuerpo

- Solo debe usarse por adultos sanos, no por personas mayores.
- Use el producto únicamente en tejidos blandos del cuerpo, sin causar dolor ni molestias.
- No lo use en la cabeza ni en cualquier parte ósea o dura del cuerpo.
- Puede aparecer moretón independientemente de si el uso está controlado o no. Revise la zona masajeadora con frecuencia y deje de usar el dispositivo inmediatamente si aparece dolor o incomodidad. Si el dolor o la molestia persisten o no pueden aliviarse, busque atención médica de inmediato.
- Solo puede usarse en superficies limpias y secas de la piel, presionando y moviendo suavemente sobre la piel, y no debe permanecer en un mismo punto durante mucho tiempo.
- Mantenga los dedos, el cabello u otras partes del cuerpo alejadas del eje y de la parte trasera del cabezal de masaje, ya que podrían quedar atrapados y causar lesiones.
- No lo use en áreas con poca cobertura muscular y cercanas a los huesos, como: columna, cuello, cabeza, articulaciones, tibia, dorso del pie y dorso de la mano.
- No lo use alrededor de las siguientes zonas sensibles y órganos, ni cerca del sistema nervioso central: ojos, dientes, implantes mamarios, prótesis, pecho, abdomen, columna, órganos reproductores, etc.
- No lo use en partes del cuerpo donde existan implantes, ya que podría afectar su funcionamiento o aflojarlos.
- No lo use en zonas con sangrado, heridas sin cicatrizar, infecciones locales o inflamación.
- Personas con enfermedades de base que no puedan dar retroalimentación sobre la presión no deben usarlo.
- Personas con enfermedades de base como trombosis no deben usarlo.

## Medidas de seguridad

- Personas embarazadas o que hayan tenido cirugías recientes no deben usarlo.
- Personas con insuficiencia cardíaca o caquexia no deben usarlo.
- No lo use en partes del cuerpo con riesgo de fractura.
- Si el dolor persiste, deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico.

### Precauciones adicionales

- Este producto no es un dispositivo médico y no debe usarse con fines médicos.
- Revise el equipo principal y el cable de conexión antes de usarlo. Si existe algún daño, debe ser reemplazado por el fabricante o por profesionales designados para evitar riesgos.

### Importante

Este producto no debe usarse en ninguna de las siguientes situaciones sin el consentimiento previo de un médico:

- Embarazo
- Complicaciones de diabetes (como neuropatía o daño retiniano)
- Marcapasos
- Cirugías recientes
- Epilepsia o migraña
- Osteoporosis
- Hernia de disco
- Espondilolistesis o rigidez en articulaciones de la columna
- Reemplazo articular reciente o DIU
- Aguja o placas metálicas
- Cualquier otro problema relacionado con su salud física

Estas contraindicaciones no significan que no pueda usar el producto, pero es indispensable consultar a un médico y recibir asesoría profesional.

## Medidas de seguridad

### Sobre la operación del dispositivo

- Seleccione el cabezal de masaje más adecuado para cada uso.
- No coloque objetos en las rejillas de ventilación.
- No moje el dispositivo ni permita que el agua entre.
- No deje caer el dispositivo ni lo use de manera inadecuada.
- Revise el dispositivo y la batería antes de cada uso.
- No lo convierta para otros fines distintos a los de masaje.
- No lo deje encendido o cargando sin supervisión.
- No lo use mientras está cargando.
- No lo arroje al fuego.
- No lo use por más de una hora continua; deje reposar el equipo 30 minutos antes de usarlo nuevamente.

### Sobre la batería

- No arroje la batería al agua ni la moje.
- No la cargue en condiciones de calor extremo ni la almacene cerca de fuego o calefactores.
- Si hay fuga de la batería o un olor fuerte, retire el dispositivo de inmediato del área cercana al fuego.
- No arroje la batería al fuego ni la caliente.
- Está prohibido transportarla o almacenarla junto con collares, pasadores u otros objetos metálicos.
- Está prohibido conectar el polo positivo y negativo de la batería con cables u otros objetos metálicos para evitar cortocircuitos.
- No use clavos u objetos puntiagudos para perforar la batería.
- No golpee ni pise la batería.
- No la aplaste ni la arroje.
- Está prohibido desarmar la batería de cualquier forma.
- Está prohibido colocar la batería en un microondas o en una olla de presión.
- Si presenta mal olor, calor, deformación, decoloración u otra situación anormal, deje de usarla; si la batería está en uso o cargándose, retírela del dispositivo o desconecte el cargador inmediatamente.

## Medidas de seguridad

### Sobre la carga

- Al usar por primera vez, cárguelo al 100% durante aproximadamente 3 horas.
- Conecta el extremo de salida del cable USB al puerto de carga DC del dispositivo y el extremo de entrada a un cargador o power bank ( $5V=2A$ ; el tiempo de carga será mayor si el cargador es de menos de  $2A$ ).
- Indicador de carga de batería: la luz verde superior parpadeante indica que se está cargando. Cuando la luz verde queda fija significa que la batería está completamente cargada.
- La batería se puede cargar en cualquier nivel de energía.
- Asegúrate de que el dispositivo esté apagado mientras se carga. El dispositivo se protege automáticamente si está encendido.
- No se recomienda agotar la batería por completo.
- Alerta de batería baja: cuando la energía está por debajo del 20%, el indicador superior mostrará una luz roja fija por 5 segundos; cuando baja del 5%, la luz roja parpadeará 10 veces y luego el dispositivo se apagará.
- El tiempo promedio de uso con una carga completa es de aproximadamente 4 horas, dependiendo de la frecuencia de vibración y la presión aplicadas durante el uso.
- El indicador de batería en la parte superior también funciona como indicador de presión: la escala de colores cambia de verde → azul → amarillo → naranja → rojo. No se recomienda aplicar presión sobre el cuerpo hasta que se encienda la luz roja del indicador.


## Descripción general

### Perfil

Este masajeador muscular de amplitud variable es un dispositivo para la relajación profunda.


### Especificaciones técnicas principales

- Producto: Masajeador muscular de amplitud variable
- Modelo del producto: RHINO GUN AIR
- Estructura: Consta de módulo de control, cabezales de masaje y batería de litio
- Frecuencia de vibración vertical:  $\leq 60$  Hz
- Amplitud: 4–10 mm
- Potencia nominal: 25 W
- Voltaje nominal: 11.1 V
- Capacidad de la batería: 2200 mAh
- Temporizador inteligente: 10 minutos
- El dispositivo cuenta con interruptor de control de salida
- El cabezal de masaje puede reemplazarse según se requiera
- Modo de funcionamiento: carga intermitente

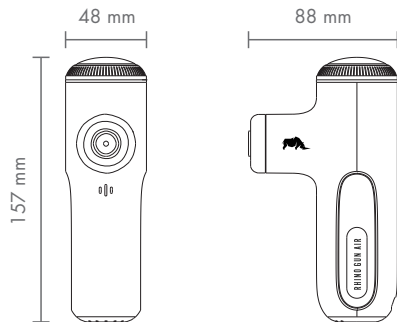

## Descripción general

### Estructura principal

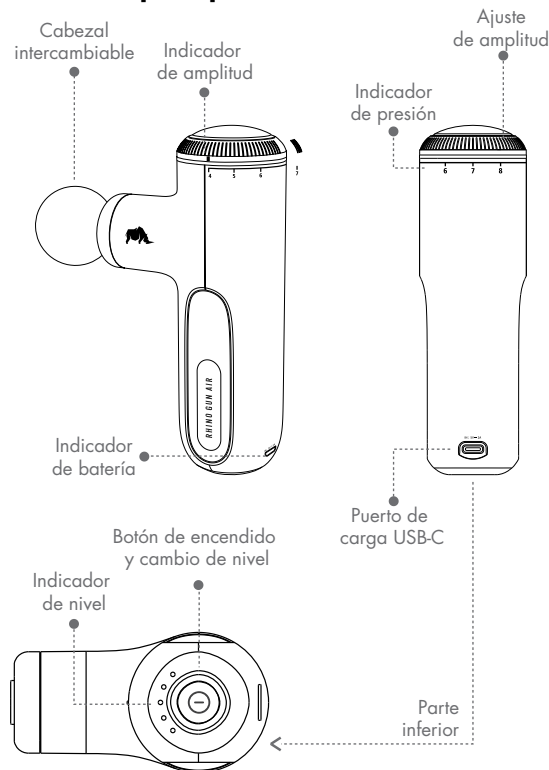

## Descripción general



Cabezal  
forma en U



Cabezal  
esférico



Cabezal  
redondo



Cabezal  
plano

### Cabezales opcionales



Cabezal  
caliente



Cabezal  
de espuma



Cabezal  
de titanio

## Método de operación



### Preparación antes de usar

- Desempaque el estuche y verifique que tenga el juego completo del dispositivo y sus accesorios. Si falta algo, contacte a su proveedor.
- Asegúrese de que el dispositivo tenga suficiente carga en la batería.





### Pasos de operación

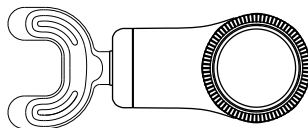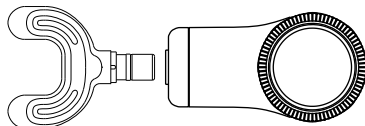- Colocar el cabezal de masaje en el dispositivo
- Con el dispositivo apagado, presione firmemente el cabezal de masaje hasta insertarlo en el equipo.

*(Consejo: el cabezal en forma de U debe colocarse alineando el seguro con la ranura hasta que encaje. De lo contrario, el cabezal puede desprenderse con facilidad).*



## Descripción general

Presionar	Función
 Mantener	Para encender, presione por 2s
	Para apagar, presione por 2s estando en modo espera
	En funcionamiento, presione por 2s para modo de espera
 Rápido	Cambia los niveles, estando encendida
 Rotación	Aumenta la amplitud
 Rotación	Disminuye la amplitud

### Notas:

- El dispositivo se apagará automáticamente si no hay operación durante 120 segundos en modo de espera.
- Cuando el dispositivo está en funcionamiento, se apagará automáticamente después de 5 bloqueos de seguridad. Si necesita seguir usándolo, debe reiniciarlo.
- La profundidad de masaje inicial (amplitud) es la última que se utilizó, no hay memoria para la amplitud.
- El ángulo de rotación para el ajuste de amplitud es de aproximadamente 0–180° (no exceder este ángulo, tiene tope de seguridad).
- Para ajustar la amplitud, gire la perilla después de encender el dispositivo. Rango: 4–10 mm.
- El ajuste de amplitud es de tipo continuo (sin escalones) y puede fijarse en cualquier punto dentro del rango de 4–10 mm.
- Cuando se use el cabezal calefactable, la función de calor debe activarse a partir del nivel 3 o superior.

## Mantenimiento y limpieza

### Mantenimiento

- Limpie el dispositivo con una toalla ligeramente húmeda y después séquelo con una toalla seca.
- Guarde el dispositivo en su caja si no se va a usar por un largo periodo de tiempo.
- No desarme el dispositivo.
- Si desea que la nueva batería alcance un rendimiento óptimo en poco tiempo, cárguelo al 100% y utilícelo hasta el 0% tres veces o más.
- Cuando el dispositivo no se use por un periodo prolongado, cárguelo al menos una vez al mes.
- Está prohibido desarmar el dispositivo sin autorización. Los daños ocasionados por manipulación no están cubiertos por la garantía.

### Desecho de batería usada

Apoye el reciclaje de baterías recargables (baterías de iones de litio).



- La batería utilizada en este producto es una batería recargable especial, que no debe usarse en otros productos. No extraiga la batería recargable para cargarla.
- Las siguientes condiciones pueden causar calor, incendio, ruptura u otros fenómenos:
- No la arroje al fuego ni la sobrecaliente.
  - No la perforo con clavos, no la golpee ni la someta a impactos o deformaciones.
  - No conecte directamente los polos positivo y negativo con metal.
  - No la almacene junto con collares, pasadores u otros objetos metálicos.
  - No la cargue ni la coloque en lugares de alta temperatura, como cerca del fuego o bajo el sol.

## Mantenimiento y limpieza



- Por favor mantenga la batería recargable retirada fuera del alcance de los niños.
- Si se ingiere accidentalmente, acuda de inmediato al médico.
- Si la batería tiene fugas, no toque el líquido con las manos desnudas y proceda de la siguiente manera:
- Si entra en contacto con los ojos, existe riesgo de ceguera. No los frote con las manos, enjuáguelos de inmediato con agua limpia y busque atención médica.
- Si toca el cuerpo o la ropa, puede causar inflamación o lesiones en la piel. Lave con abundante agua limpia. Si persiste la molestia, acuda al médico.
- La batería de iones de litio interna de este dispositivo es un recurso valioso que puede reciclarse.
- Cuando el producto sea desechado, retire la batería y entréguela a una organización especializada en la disposición de baterías usadas.
- Solo cuando el producto vaya a desecharse puede desarmarse. Si no se respeta, podría causar incendios, descargas eléctricas, lesiones u otros accidentes.
- Si el dispositivo necesita reparación (excepto reemplazo de batería), por favor contacte al vendedor original.

- La batería interna de iones de litio del dispositivo es un recurso valioso que puede reciclarse.
- Extráigala y entréguela a una organización especializada en la disposición de baterías usadas.

### Uso, transporte y almacenamiento

Condiciones ambientales para la instalación del producto

- Temperatura ambiente: de 5 °C a 40 °C
- Humedad relativa: ≤ 90%
- Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa

### Transporte

- Temperatura ambiente: de -20 °C a 50 °C
- Humedad relativa: ≤ 90%

- Este producto es adecuado para transporte en automóvil, tren, barco, avión y otros medios.
- Durante el transporte debe asegurarse para evitar vibraciones fuertes, colisiones, vuelcos o caídas; debe mantenerse en posición vertical, manipularse con cuidado, protegerse de golpes y de la lluvia.
- No se deben apilar más de 5 unidades del masajeador.

### Almacenamiento

- El producto debe almacenarse en un lugar seco, ventilado y libre de agentes corrosivos.
- Cuando el dispositivo no se utilice durante un periodo prolongado, debe limpiarse, empacarse y almacenarse. Se recomienda sacarlo y cargarlo una vez al mes para evitar daños por humedad.

## Póliza de garantía

High Performance Recovery, S.A. de C.V garantiza este producto por tres meses a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, bajo la siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá recurrir a su vendedor autorizado o enviar un correo que se indique en esta garantía y donde podrá obtener las partes, refacciones y accesorios.
2. High Performance Recovery, S.A. de C.V. Se compromete a reparar o reemplazar cualquier parte del producto encontraba con falla sin ningún cargo para el consumidor siempre que el daño sea un error de fabricación.
3. Deberá de presentar el producto con todas sus partes y el comprobante de compra, factura o nota.



**4.** El tiempo de reparación no excederá de 90 días naturales, contados a partir de la recepción de su correo o llamada solicitando ser efectiva su garantía.

**5.** La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

Si el producto ha sido usado en condiciones distintas a las normales.

Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado.

Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres no autorizados.

**6.** Limitaciones de la Garantía:

Si no presenta la factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.

Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.

Si ha sido utilizado con fines comerciales, de presentación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente para uso personal.

Daños en equipo y partes de apariencia.

Rotura de piezas por mal manejo.

Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocados por cortocircuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.

Daños por uso de partes que no sean genuinas.



RECOVER FASTER, PERFORM BETTER.

**Para otros problemas o dudas, contacta:**



✉ **Email:** [hola@rhino-performance.com](mailto:hola@rhino-performance.com)

📞 **Atención al cliente:** 55 1839 3224